

Технические характеристики

	аппликатор для процедуры лифтинга	аппликатор для тела	аппликатор для лица
RF мощность	до 125 Дж/см ³	до 50 Вт	до 8.5 Вт
RF режим 1	850 кГц	850 кГц	850 кГц
RF режим 2	1.7 МГц	1.7 МГц	1.7 МГц
RF режим 3	2.45 МГц	2.45 МГц	2.45 МГц
RF режим 4	850 кГц, 1.7 МГц, 2.45 МГц	850 кГц, 1.7 МГц, 2.45 МГц	850 кГц, 1.7 МГц, 2.45 МГц
Вакуум	отсутствует	пульсирующий	пульсирующий
обрабатываемая поверхность	8 мм x 8 мм	35 мм x 30 мм	15 мм x 10 мм
Вес	17 кг (без колесной базы) 19 кг (с колесной базой)		
Габариты	40 см (длина) x 35 см (ширина) x 45 см (высота)		

Система Reaction™ зарегистрирована в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь.

Эксклюзивный дистрибьютор в Республике Беларусь

ООО «Королева-Бай»
220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 22, оф. 302
тел.: (017) 284 9 666, (029) 334 9 666, (033) 313 4 666
e-mail: info@koroleva.by

www.koroleva.by



газgroup



Новое
измерение
в мире
эстетики

REACTION™



Reaction™. Частота RF на волне вашей молодости

Radio Frequency (электрический ток в радиочастотном диапазоне, сокращенно RF) – новый метод неинвазивной стимуляции неокollaгеноза в дерме и соединительнотканых волокнах гиподермы. Принцип радиоволнового лифтинга ткани основан на контактом воздействии высокочастотного электрического тока с целью контролируемого прогрева дермы и подкожно-жировой клетчатки. В результате создается определенный температурный режим, инициирующий денатурацию коллагеновых волокон и стимулирующий синтетическую активность фибробластов. В основе эстетического эффекта этой процедуры лежит контролируемое воспаление в дерме, которое становится «пусковым механизмом» для реструктуризации, омоложения кожи. Косметологическая система Reaction™ - это инновационная фирменная разработка для безоперационной подтяжки кожи, лечения целлюлита и уменьшения объемов, которая максимально использует радиочастотную энергию 4 поколения (4th dimension) в сочетании с глубоким вакуумным массажем для эффективного и безопасного воздействия.

Основные задачи системы Reaction™

- Борьба с локальными жировыми отложениями и целлюлитом
- Восстановление мышечного тонуса
- Омоложение и лифтинг кожи за счет синтеза коллагена



CORE™ технология. Мультирадиолифтинг и вакуумная терапия


Воздействие при помощи CORE™ (Channeled Optimal RF Energy – каналов оптимальной радиочастотной энергии) – запатентованной технологии Reaction™. Инновационный мультичастотный метод радиолифтинга, отличительной чертой которого является возможность использования 3-х радиочастот (0.85 МГц, 1.7 МГц, 2.45 МГц) с дополнительной четвертой мультичастотой (4th dimension), концентрирующей все 3 частоты в одном импульсе. Прибор работает по принципу биполярности, снабжен манипулой, в которую встроены сразу 2 электрода. Воздействие осуществляется только в рабочей зоне, соответствующей площади манипулы. Ток в этом случае протекает только в пределах кожной проекции и не распространяется на другие участки тела. Кроме того, уникальная вакуумная терапия, осуществляемая за счет расположения кожи между 2-мя RF-электродами во время процедуры, усиливает и углубляет проникновение радиочастотной энергии.

Система Reaction™ включает 3 аппликатора для работы по лицу и телу:

- B-Contour – аппликатор для тела (100 рабочих часов / 200-300 процедур)
- F-Contour – аппликатор для лица (100 рабочих часов / 200-300 процедур)
- Skin Tightening – аппликатор для процедуры лифтинга (1000 рабочих часов / 2000 процедур)

Преимущества Reaction™

- Возможность устранить эстетические проблемы у женщин и мужчин
- Безболезненность и безопасность процедур
- Результат заметен уже после первого сеанса и отличается длительным эстетическим эффектом (5-6 месяцев)
- 192 программные комбинации
- Совместимость с другими методиками (химические пилинги, инъекционная контурная пластика, биоревитализация, фотоомоложение и пр.)
- Простота в работе
- Низкие эксплуатационные расходы
- Быстрая окупаемость

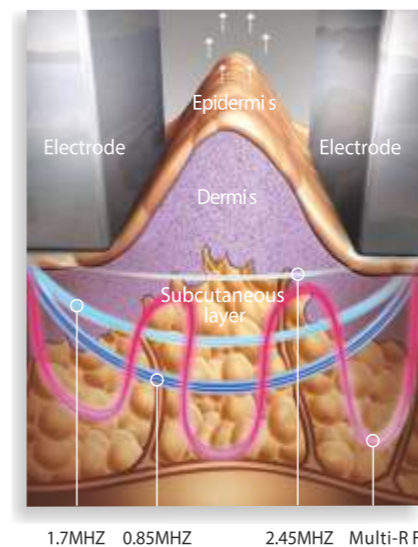

CORE™ технология

Мультичастоты обеспечивают оптимальные клинические результаты через совершенный контроль, точное воздействие, глубокое проникновение и высокую концентрацию энергии.



Мультичастоты. Мультивозможности

Процедуры с использованием RF-технологий часто называют «радиочастотный лифтинг», «термолифтинг», «радиочастотное омоложение», «термаж».

«Thermage перевернул наши представления о современных методах омоложения. Многие пациенты хотели подтянуть кожу, не прибегая к хирургическому вмешательству, теперь мы можем это им предложить. За 30 минут мы получаем результат, для достижения которого раньше требовалась многочасовая пластическая операция и месяцы восстановления. Отклик пациентов огромен: все, кто услышал об этой процедуре, хотят немедленно попробовать ее на себе, а те, кто испытал воздействие Thermage, в восторге от результатов».

- Michael Kammer, доктор медицины, доцент дерматологии Йельской и дармутской Школ Медицины, владелец частной практики в Бостоне.

Противопоказания

Основными противопоказаниями к проведению RF-методики являются: онкологические заболевания, коллагенозы, нарушения свертывания крови, сахарный диабет, наличие искусственного водителя ритма, «металл» в зоне воздействия («золотые» нити и пр.), беременность и лактация, свежие шрамы или раны, скарификация кожи в зоне воздействия, пиодермия и дерматозы в стадии обострения. Значительное снижение эффективности процедуры может происходить в случае сухости кожи и при ее дегидратации.

